



SG DEVELOPMENT & DISTRIBUTION

Votre partenaire en Solutions
Médico-Esthétiques.
Développez votre expertise

**BROCHURE
ÉPILATION LASER**

L'utilisation



L'épilation définitive au laser est une technique qui utilise des faisceaux de lumière pour détruire les follicules pileux, empêchant ainsi la repousse des poils.

Elle est généralement considérée comme **plus efficace** que les méthodes d'épilation temporaires telles que le rasage, la cire ou les crèmes dépilatoires, car elle peut fournir des résultats permanents.

Lors d'une séance d'épilation au laser, un professionnel lasériste applique un faisceau de lumière concentré sur la zone à traiter. Le faisceau de lumière est absorbé par la mélanine du poil, **qui chauffe et détruit le follicule pileux et empêche la repousse des poils.**



Épilation définitive
Fonctionne sur les 5
phototypes de peau



Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Nom du produit**
Machine épilation laser
- **Langues**
Français/Anglais
- **Certification**
Dispositif médical MDD (-93/42/CEE)
- **Société**
SG Development Distribution
- **Poids brut**
80 kg



POIGNÉE INTELLIGENTE





| Paramètres

Spécifications techniques des pièces

- **Dimensions**
58*44*115cm
- **Taille écran**
Écran tactile 15,6 pouces
- **Système de refroidissement**
Eau + ventilateur + refroidissement TEC
Niveau de refroidissement à -29° pendant le traitement pour le contact avec la poignée
- **Longueurs d'onde laser**
755nm + 808nm + 1064nm
+ 940nm
- **Largeur d'impulsion**
1-100 ms
- **Puissance laser**
1600W / 2000W / 2400W
- **Puissance machine**
3200W / 4000W / 4800W
- **Taille spot**
10*20mm, 12*12mm, 12*28mm,
12*35mm, 12*18mm + facial tip
- **Energie**
Verticale 1-80j/cm2 réglable
- **Fréquence de répétition**
1-10 Hz réglable
- **Service après-vente**
10 ans
- **Tirs**
40 millions de tirs






| Paramètres

Poignée réglable

Différentes tailles d'embouts peuvent être réglables pour différentes parties du corps.

— Les avantages

- ✓ Simple et facile à utiliser
- ✓ Matériaux en alliage
- ✓ Vitesse de refroidissement rapide
- ✓ Poignée aimantée

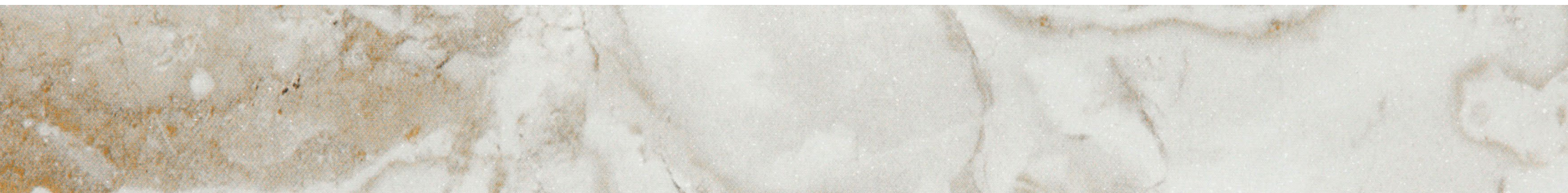



| Paramètres

Analyseur de peau et de poil

- Un analyseur de peau et de poil est inclus avec la machine.

Cet embout révolutionnaire permet un diagnostic précis avant chaque séance.

Offrez à votre clientèle des traitements adaptés à leur type de poils et de peaux.

NOUVEAU





| Contenu et emballage

Le contenu du colis



- 1 pièce à main
- Lunettes de protection
- 6 embouts interchangeables
- Oeil google
- 1 entonnoir à eau
- Vanne d'entrée d'air filtre
- Serrure d'entrée
- Mode d'emploi en français
- Pédale
- Cordon d'alimentation
- Fusibles
- Clés
- Analyseur de peau et de poil

Caisse de transport

Boîtier international en aluminium avec mousse d'amortissement à l'intérieur.





Pieces de rechange de base



Barres laser Allemagne
Énergie de sortie stable



Pompe à eau italienne
Débit élevé



Système CEM Compatibilité électromagnétique
Protège des autres ondes électromagnétiques



Marque Schneider
Plus de 10 ans de durée de vie




Protection de tuyau
Protège la conduite d'eau des dommages de flexion. Tuyau italien plus flexible et de longue vie.



Filtre à eau
Facile à changer



Serrure d'entrée
Assure la sécurité du fonctionnement du laser. Possibilité de connecter avec «l'entrée de la salle laser».

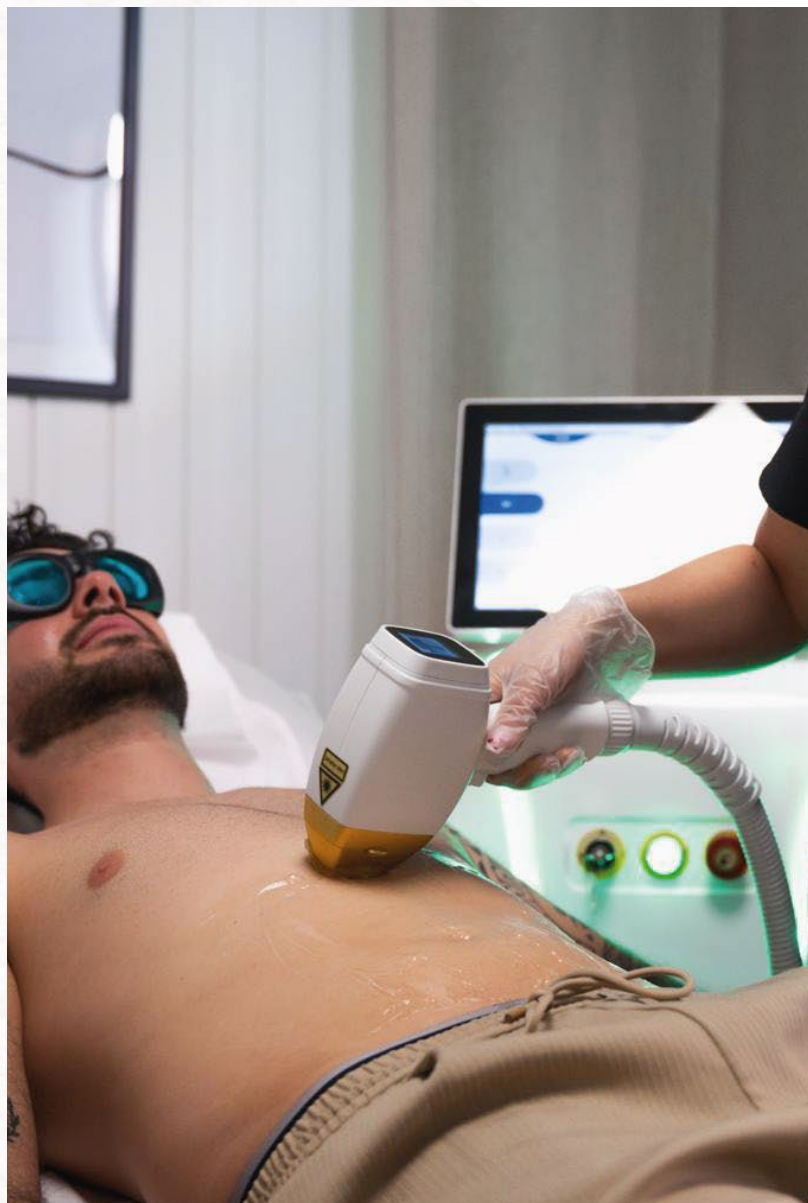

Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice.

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.



| Nous contacter

 04 23 32 42 60

 distribution_sg.professionnel

 www.distribution-sg.ch

 sg_development.distribution